

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40° С. Не применять машинную стирку. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав:

45% нейлон, 40% полиэстер, 10% полиуретановый поролон, 5% хлопок.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельного изменения конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. AS-302, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации бандажа.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
РУ № ФСЗ 2011/09551 от 12.04.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00209 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ,

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Арт. INTOK-AS-302-N4_12/11



Medical Line



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Orlett®
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий



**Бандаж на плечевой сустав
(косыночный) AS-302**

Бандаж Orlett на плечевой сустав (косыночный для поддержки верхней конечности), арт. AS-302 широко используется как самостоятельный способ иммобилизации, так и в сочетании с другими ортезами на суставы верхней конечности или традиционными гипсовыми повязками.

Простая и эффективная конструкция обеспечивает фиксацию и разгрузку суставов верхней конечности в поддерживающей опорной «муфте» и оптимизирует положение руки.

Показания к применению:

- ушибы, реабилитация после подвывихов, вывихов и переломов костей верхней конечности;
- частичные повреждения связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава;
- поддержание руки при острых и хронических воспалительных заболеваниях суставов верхней конечности (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты);
- парезы и параличи верхней конечности (руки).

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:

Не выявлены.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.

Инструкция по применению:

Конструкция бандажа:

Цифры на фотографиях соответствуют следующим элементам конструкции:

1. Муфта косыночного бандажа из сетчатой ткани
2. Плечевой ремень со смягчающей муфтой
3. Поясничный ремень
4. Трехлепестковая Y-образная застежка-липучка «Велкро»
5. Крепление для плечевого ремня
6. Крепление для поясничного ремня
7. Петля для I пальца кисти



Порядок надевания:

1. Предплечье разместить в муфте косыночного бандажа (1).
2. Свободный конец плечевого ремня (2) с застежкой-липучкой «Велкро» продеть через крепление (5) и отрегулировать по длине таким образом, чтобы угол сгибания в локтевом суставе составил 90 градусов (прямой угол), если иное положение локтевого сустава не назначено лечащим врачом.
3. При необходимости длину плечевого ремня можно уменьшить. Для этого отстегнуть трехлепестковую Y-образную застежку-липучку «Велкро» (4), отрезать излишнюю длину ножницами. Затем закрепить Y-образную застежку-липучку «Велкро» по обрезанному краю и пристегнуть к плечевому ремню (2).
4. I-ый (большой) палец кисти вдеть в петлю (7) (для разгрузки лучезапястного сустава и предотвращения соскальзывания предплечья из косынки).

Правила подбора:

Сантиметровой лентой измеряется длина предплечья от вершины локтевого отростка до плюсне-фалангового сустава V пальца.

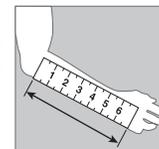


Таблица подбора размеров:

Размер	XXS*	XS*	S	M	L	XL
Длина предплечья (см)	До 27	27-30	30-33	33-36	36-39	Свыше 39

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

* Размер XXS рекомендуется пациентам с длиной предплечья до 27 см (при нормостеническом телосложении – дети до 7 лет).

** Размер XS рекомендуется пациентам с длиной предплечья от 27 до 30 см (при нормостеническом телосложении – дети от 7 до 14 лет).