

© Nea



1 3036-10 1 / 3

Designed in the Netherlands  
Made in the EU

www.push.eu

The Netherlands  
6199 AB Maastricht-Airport  
Europalaan 31  
Nea International bv



3.10.1



## ORTHO

Ортез на большой палец руки  
THUMB BRACE CMC



## Инструкция по применению



• ru

Продукция Push ortho представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для замещения утраченных функций опорно-двигательного аппарата.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу [sales@nikamed.ru](mailto:sales@nikamed.ru)

### ОРТЕЗ НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ РУКИ PUSH ORTHO THUMB BRACE CMC Артикул: 3.10.1

#### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Артроз лястно-запястного сустава первого (большого) пальца.
- Реабилитация после оперативных вмешательств, в том числе артропластики лястно-запястного сустава первого (большого) пальца.
- Нестабильность лястно-запястного сустава первого (большого) пальца.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть ремни с застежками-липучками «Велкро».

Правильная последовательность фиксации ремней определяется по увеличению количества символов ☐ на застежках «Велкро».

Ортез Push ortho Thumb Brace CMC представлен моделями для правой и левой руки. Маркировка нанесена на упаковке и на ремнях ортеза с застежками-липучками «Велкро».

Оберните ортез вокруг руки так, чтобы фиксирующие ремни с застежками-липучками «Велкро» оказались на тыльной стороне ладони. Большой палец поместите в отверстие так, чтобы алюминиевая скоба плотно прилегала к области лястно-запястного сустава большого пальца ①. Протяните ремни с застежками-липучками «Велкро» через специальные отверстия ② и зафиксируйте ортез Push ortho Thumb Brace CMC на руке ③.



*При необходимости алюминиевую скобу можно дополнительно моделировать для обеспечения плотного прилегания ортеза к области лястно-запястного сустава ④.*

#### РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push ortho Thumb Brace CMC на большой палец руки может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push ortho Thumb Brace CMC.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push ortho Thumb Brace CMC требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push ortho Thumb Brace CMC. Не забывайте проверять ортез Push ortho Thumb Brace CMC на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

#### СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ



Ортез Push ortho Thumb Brace CMC — высокоэффективный ортез для стабилизации лястно-запястного сустава большого пальца. Позволяет создать стабильность большого пальца и в то же время сохранить подвижность руки: движения лястной части первого пальца и кисти целиком.

Специальный поддающийся ручной (холодной) формовке алюминиевый стабилизирующий элемент предотвращает подвывих, особенно при приложении усилий.

Применение ортеза Push ortho Thumb Brace CMC позволяет уменьшить боль и сохранить активность движений большого пальца при выполнении бытовых действий.

Специальные материалы и округленные края способствуют максимальному комфорту при ношении ортеза. Ортез можно легко надеть без посторонней помощи. Материалы ортеза не портятся от воды, обладают антибактериальными свойствами, моются, гигиеничны. Ортез компактен и эстетичен. После использования ортез рекомендуется подсушить с помощью сухой ткани.

#### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 3.10.1

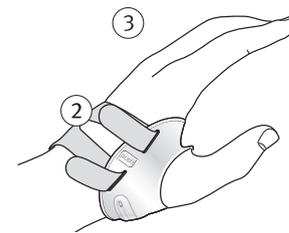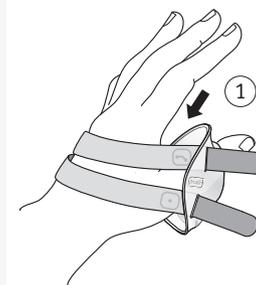

Артикул 3.10.1

Производитель NEA International BV  
(NEA Интернешнл БиВи)  
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»  
Россия,  
143405, Московская область,  
г. Красногорск,  
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,  
127220, Москва, а/я № 58,  
ООО «НИКАМЕД»  
представитель в России и СНГ,  
тел.: 8-800-33-33-112,  
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием  
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение  
№ ФСЗ 2009/04856 от 25.03.2016 г.  
выдано Росздравнадзором,  
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии  
№ РОСС NL.АЯ46.Д72395  
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО  
«Региональный орган по сертификации и  
тестированию»



### ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push ortho Thumb Brace CMC на большой палец руки не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push ortho Thumb Brace CMC для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в руке. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

### ПОДБОР РАЗМЕРА



Сантиметровой лентой измеряется окружность ладони. Ортезы Push ortho Thumb Brace CMC на большой палец руки выпускаются в трех размерах раздельно на правую и левую руки (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез.

### ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застёжки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С.

Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Чтобы продлить срок службы, после использования ортез следует просушить.



### СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

### РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2, 3

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

#### Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

### ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 3.10.1

