



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [VENOTEKS](#) | Изделия компрессионные для нижних и верхних конечностей в наборах и в отдельных упаковках: рукав, арт. 2L506

VENOTEKS®

LYMPHO

Изделия компрессионные для нижних и верхних конечностей в наборах и в отдельных упаковках: рукав, арт. 2L506



бежевый



Артикул: 2L506

РАЗМЕРЫ	S, M, L, XL
ДЛИНА	стандарт (см. таблицу подбора размеров)



ИНСТРУКЦИЯ [Скачать](#)

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Компрессионный рукав с захватом кисти для больных с лимфовенозной недостаточностью

2-ый класс компрессии 26-32 мм рт. ст.

Лечебные компрессионные рукава современное и эффективное средство для профилактики и лечения лимфатических отеков верхних конечностей. Компрессионный рукав восстанавливает отток лимфы из тканей руки, быстро и эффективно снимает отеки, в короткие сроки приносит облегчение и повышает качество жизни.

Лечебные компрессионные рукава изготовлены по современной технологии круговой вязки, имеет пористую структуру, которая позволяет коже дышать, и делает изделие удобным и комфортным. Нижняя часть рукава захватывает кисть. Рукав надежно фиксируется на плече без скручивания, соскальзывания и образования складок, отсутствие швов предотвращает травмирование кожи.

Состав: 75% нейлона, 25% эластана

Характеристики

- Оптимальное физиологически распределенное давление, максимальное в области запястья, постепенно убывающее к верхней трети плеча;
- Параметры компрессии заложены в сложной современной технологии их изготовления;
- Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба;
- Эффективная фиксация на плече, не скатывается и не перетягивает руку;
- Специальная технология круговой вязки без швов предотвращает травмирование кожи, обеспечивает температурный и водный баланс кожи;
- Мягкая, гипоаллергенная, дышащая ткань;
- Гарантированное сохранение компрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневного использования;
- Производится из современных, безопасных материалов, обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен. LatexFree.

Показания к применению

Первичная лимфедема (врожденные аномалии лимфатической системы, болезни Милроя, юношеская лимфедемия и т.д.);

Вторичная лимфедема:

- состояния после мастэктомии и лучевой терапии;
- при повреждении лимфатических сосудов вследствие травм;
- при повреждении лимфатических сосудов вследствие операций и глубоких ожогов;
- осложнение рожистого воспаления дермы и подкожной клетчатки;
- осложнение при длительном ограничении подвижности руки на фоне инсультов, применения гипсовых повязок, синдрома "теннисного локтя и других заболеваний;

Тромбозы и тромбозы вен плеча и предплечья (включая постинъекционные осложнения).


Противопоказания:

- Заболевания артерий (облитерирующий атеросклероз, эндартериит, диабетическая полинейтропатия и ангиопатия);
- Сердечно-легочная недостаточность;
- Острая инфекция мягких тканей;
- Местные кожные заболевания;
- Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа;
- Нарушение чувствительности.

Подбор размеров

Измерения проводят при выпрямленной руке. Окружность руки следует измерять от уровня ладони (А) до уровня С, расположенного на 3 см ниже подмышки. Для подбора размера перчатки достаточно произвести измерения А и С.

Градуированная компрессия изделий LYMPHO (26-32 мм рт.ст. на уровне запястья) – физиологически распределенное давление по руке, максимальное в области запястья и постепенно уменьшающееся к плечу.

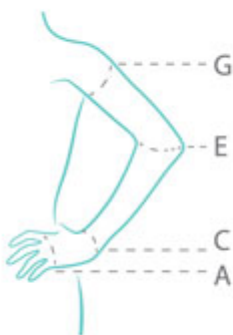

A – окружность ладони в самой широкой части

С – окружность на уровне запястья

Е – окружность на уровне локтя

G – окружность на уровне подмышечной складки

Размер	S	M	L	XL
Измерение окружности (см)				
G	27-31	31-35	35-40	40-45
E	24-27	27-31	31-35,5	35,5-41
C	15-17	17-19,5	19,5-22,5	22,5-26
A	17,5-19,5	19,5-22	22-25	25-28

Артикул	Вид изделия	Состав
2L504	рукав без перчатки	75% нейлон, 25% эластан
2L506	рукав с захватом кисти	75% нейлон, 25% эластан
2L507	рукав с захватом кисти и лямкой на плечо (правый и левый)	80% нейлон, 20% эластан
2L607	перчатка	80% нейлон, 20% эластан

Примечание:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2

Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a
mp;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a
mp;&&&&<div&&&&&&&&&&&&&&&&a
mp;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a
mp;&&&&&&&&&&>&&&&&&&&&&a
mp;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a
mp;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a
mp;&&&&&&&&&&<img src="//mc.yandex.ru/watch/23960755"

[illegible]